



### SPRÁVNÉ NAČASOVÁNÍ

Výrobek Physio Hybrid Shapes™ můžete použít kdykoliv. Provozujete-li atletické či fitness aktivity, aplikujte výrobek 1 až 2 hodiny před zahájením cvičení.



### NASTAVITELNÉ NAPNUTÍ

Optimálního výsledku lze při provozování vysoce náročných atletických disciplín dosáhnout bez natahování, při denním nošení či lehké atletice pak mírným natažením (ne však více než cca 1,25 cm).




### DOKONALÁ PŘÍPRAVA POKOŽKY

Pokožku v příslušné oblasti důkladně omyjte a osušte, abyste ji zbavili mastnoty, vlhkosti či nečistot. Případné chloupky přistříhnete nebo oholíte. Při aplikaci by pokožka i výrobek RAPIDFORCE shape měly mít pokojovou teplotu.



### SPOLEHLIVÉ PŘILNUTÍ

Po aplikaci výrobku silným třením aktivujete a maximalizujete jeho vlastnosti, které zajistí přilnutí k pokožce.

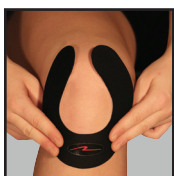

**1. Aplikace středu výrobku ve tvaru písmene U.** Prohmatáním horní/spodní části kolene zjistíte, kde se nachází nejbolestivější oblast. Sloupněte ochrannou vrstvu ve středu výrobku a umístěte jej přímo na nejbolestivější místo. Spolehlivého přilnutí dosáhnete přitlačením výrobku.



**2. Aplikace úchytů výrobku ve tvaru písmene U okolo kloubu.** Sloupněte ochrannou vrstvu ve střední části jednoho z úchytů výrobku ve tvaru U a konec zatím ponechte na místě. Jednou rukou přidržte střed výrobku a druhou přizpůsobte míru napnutí pro příslušnou úroveň aktivity a úchyt umístěte kolem kloubu. Dodržením vzdálenosti od čéšky na šířku 2,5 cm zajistíte obepnutí celého kloubu. Pohybem od středu výrobku ve tvaru U směrem ven látku na pokožce vyhladte. Odstraňte ochrannou vrstvu z konce úchytu a přiložte jej k pokožce (tuto kratší část nenapínejte). Po dobu asi 10 sekund tlačte na celý úchyt výrobku ve tvaru U, čímž zajistíte jeho spolehlivé přilnutí.



**3.** Po aplikaci by měl výrobek RAPIDFORCE PHS vypadat tak, jak vidíte na obrázku.



### VÝROBEK ODSTRAŇUJTE POMALU

Výrobek odstraníte tahem od konce pásků směrem ke středu. V případě chloupků můžete potlačit nepříjemné pocity, budete-li tahat ve směru růstu.

Tip: Odstranění lze usnadnit ve sprše pomocí jemného mýdla a teplé vody.

*Tento výrobek je určen na jedno použití. Dojde-li k zintenzivnění bolesti či kožní reakci, ihned výrobek přestaňte využívat.*

*Nevyužívejte tento výrobek v kombinaci s vyhřívacími polštářky. Neaplikujte výrobek na otevřené zranění.*