

Úvod


Tato masážní pistole je špičkové masážní zařízení, které využívá pulzující vibrace ke zlepšení tělesných schopností a celkového výkonu.

Masážní pistole je vyrobena z nejlepších průmyslových komponent, které poskytují správné množství vibrací. Nabízí lidem všech věkových skupin a všech úrovní fyzické zdatnosti možnost ke zlepšení celkového fyzického výkonu, možnost rychlejšího zotavení po zranění, zlepšení flexibility, rozsahu pohybu, ale i pohodlí a celkové pohody.

1. Vyjímatelné, vyměnitelné masážní hlavice. Pevně uchopte, vytáhněte a vyjměte
2. Vysokorychlostní bezkomutátorový motor
3. AC nástěnná nabíječka (24VDC-1A)
4. Vypínač
5. LED indikátor úrovně frekvence (modrý)
6. LED indikátor stavu baterie (zelená, červená)
7. tlačítko pro vyjmutí baterie
8. DC nabíjecí port
9. tlačítko ON / OFF



概述
这个冲击式按摩器是一种切割工具。
使用撞击的边缘按摩装置
振动恢复肌肉和释放
筋膜
回收式按摩器制造
使用行业领先组件
提供一个完美的振动量

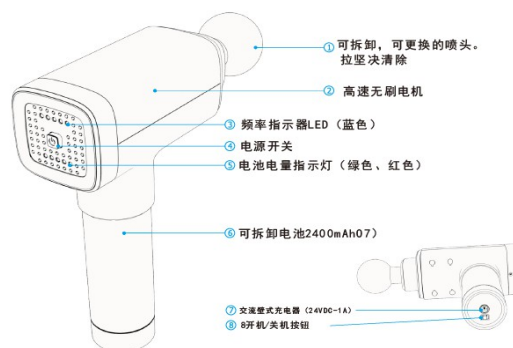

SPECIFIKACE

AC nabíječka: 110-240V 50/60 Hz - .7A - 24VDC-1A

Puls (BPM) / Frekvence (Hz): úroveň 1 - 1500/25, úroveň 2 - 1900/31, úroveň 3 - 2400/40, úroveň 4 - 2850/47, úroveň 5 - 3250/54.

Hmotnost: 1,1 kg (1,4 kg včetně nabíječky)

Provoz

Zapněte napájení přístroje přepnutím vypínače na spodní straně baterie do polohy ON. Vypněte zařízení přepnutím vypínače do polohy OFF.

Je-li hlavní vypínač v poloze ON, stiskněte jednou tlačítko napájení pro zapnutí zařízení na úroveň jedna, dvakrát pro zapnutí zařízení do úrovně dva a třikrát pro úroveň tři. Stejným způsobem můžete nastavit úroveň čtyři nebo pět. Další stisknutí tlačítka napájení zařízení opět vypne. Modré LED diody indikují odpovídající úroveň výkonu.

Po ukončení masáže prosím přístroj vypněte.

Podle potřeby masírujte požadovanou část těla požadovanou rychlostí. Produkt má vestavěné ochranné zařízení, které přístroj automaticky zastaví, když běží po dobu 10 minut.

Plně nabijte baterii až šest hodin před prvním použitím, baterie mohou být připojené nebo odpojené od zařízení.

Pro nabíjení připojte konec DC 24V adaptéru k nabíjecímu portu baterie a zapojte kabel nástěnné nabíječky do zásuvky.

LED pásek na světlech baterií pulzuje, aby ukazoval stav baterie a indikoval aktivní nabíjení.

Pokud se baterie nabíjí, blikají LED kontrolky a signalizují tak úroveň nabití baterie a aktivní nabíjení.

Baterie jsou plně nabité, když LED kontrolky přestanou blikat a zůstanou svítit.

Baterii lze nabíjet kdykoli a při jakékoli úrovni nabití.

Nedoporučuje se zcela vybit baterii až na červenou úroveň LED.

Zařízení vydrží v provozu většinou více než dvě hodiny v závislosti na rychlosti vibracích během používání.

Nabíjení

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE:

PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM A POŽÁREM MUSÍ BÝT TENTO PRODUKT POUŽÍVÁN V SOULADU S NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY.

1. Produkt je určen pouze pro dospělé.
2. Používejte pouze na suchý čistý povrch těla přes oděv lehkým stlačením a pohybem po těle přibližně 60 vteřin na konkrétní oblast těla.
3. Masážní zařízení používejte podle potřeby pouze na měkké tkáni těla, aniž byste vyvolali bolest nebo nepohodlí. Nepoužívejte na hlavě, kloubech nebo kostnatých částech těla.
4. Používejte pouze nástavce, které poskytují nejlepší požadovaný efekt.
5. Pohmoždění může nastat bez ohledu na nastavení regulace nebo aplikovaný tlak. Ošetřované oblasti často kontrolujte a okamžitě přístroj zastavte při prvních známkách bolesti nebo nepohodlí.
6. Udržujte prsty, vlasy a jiné části těla mimo hřidel a zadní stranu

- masážního nástavce, jinak by mohlo dojít ke skřípnutí.
7. Do ventilačních otvorů masážního zařízení nevkládejte žádné předměty.
 8. Neponořujte do vody ani nenechte vodu proniknout do ventilačních otvorů masážního zařízení.
 9. Masážní zařízení před pádem a špatným použitím.
 10. Nabíjejte pouze originální nabíječkou 24VDC.
 11. Před každým použitím zařízení a baterii pečlivě zkontrolujte.
 12. Masážní zařízení sami nijak nepravujte ani nepředělávejte.
 13. Nikdy nenechávejte masážní zařízení v provozu nebo nabíjení bez dozoru.

Údržba, čištění, skladování

K čištění zařízení použijte navlhčený ručník a následně osušte měkkým hadříkem.

Při skladování a přepravě vždy vyjměte baterii a uložte ji do originální kartonové krabice.

Upozornění

Neponořujte do vody. Chraňte před vlhkem a teplem. Udržujte ventilační otvory čisté.

Neodstraňujte šrouby ani se nepokoušejte přístroj rozebrat.

Nepracujte nepřetržitě déle než hodinu. Před opětovným použitím nechte zařízení 30 minut odpočívat.

Po nabíjení nebo před použitím zařízení odpojte nabíječku.

Pouze pro dospělé. Nepoužívejte, pokud jste zraněni. Před použitím tohoto produktu se poraďte se svým lékařem.

Používejte pouze v souladu s instrukčními materiály, které jsou součástí přílohy pokynů k produktu.

PROSÍM NEPOUŽÍVEJTE MASÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ NEBO ŽÁDNÉ JINÉ VIBRAČNÍ ZAŘÍZENÍ BEZ PŘEDCHOZÍHO SCHVÁLENÍ OD VAŠE LÉKAŘE, POKUD PRO VÁS PLATÍ COKOLIV Z NÁSLEDUJÍCÍHO:

Těhotenství, cukrovka s komplikacemi (jako je neuropatie nebo poškození sítnice), nedávná operace, epilepsie nebo migrény, vyhřezlé ploténky, spondylolistéza nebo spondylóza, nedávné náhrady kloubů nebo pokud máte jakékoli obavy o vaše fyzické zdraví. Slabší jedinci a děti by měly být doprovázeni dospělými při použití jakéhokoli vibračního zařízení. Tyto kontraindikace neznamenají, že nejste schopni používat vibrační nebo masážní zařízení, ale doporučujeme vám nejprve se poradit s lékařem.

Probíhá průběžný výzkum účinků vibračních cvičení na specifické zdravotní poruchy. Výsledkem bude pravděpodobně zkrácení seznamu kontraindikací, jak je uvedeno výše. Praktické zkušenosti ukázaly, že začlenění vibračního cvičení do léčebného plánu je v řadě případů žádoucí. Masáž musí být prováděna na základě doporučení a doprovodu lékaře, specialisty nebo fyzioterapeuta.

Záruka platí od okamžiku nákupu.

Pokud produkt selže z důvodu vad materiálu nebo provedení během 2 let od zakoupení, prodávající společnost opraví nebo vymění díly nebo zdarma vymění celý produkt, s výjimkou následujících případů:

1. Nesprávné použití nebo poškození zařízení způsobené přepravou.
2. Neoprávněná demontáž a oprava tohoto zařízení.
3. Nedodržení pokynů.
4. Produkt je poškozen v důsledku používání nebo skladování v neobvyklém prostředí nebo špatnou údržbou zákazníka.
5. Při reklamaci je potřeba doložit doklad o nákupu.

DOVOZCE DO ČR:
TEJPY.cz s.r.o.
Pohnertova 1724/4
182 00 Praha 8

TEJPY.CZ Váš oblíbený dodavatel potřeb
pro bezpečnější sport
TEJPY.cz s.r.o. IČ: 24932493
Pohnertova 1724/4 DIČ: CZ24932493
182 00 Praha 8 www.tejpy.cz | info@tejpy.cz

